



UZ
LEUVEN



Procedure plaatsen Dexcom sensor

stappenplan

UZ
Leuven

Herestraat 49
B - 3000 Leuven

www.uzleuven.be
tel. +32 16 33 22 11

UNIVERSITY HOSPITALS LEUVEN

Dexcom sensor plaatsen

Was je handen en werk zo proper mogelijk




Dexcom sensor plaatsen

Ontsmet de huid en laat goed drogen



Dexcom sensor plaatsen

Haal de sensor uit de verpakking en verwijder de papiertjes

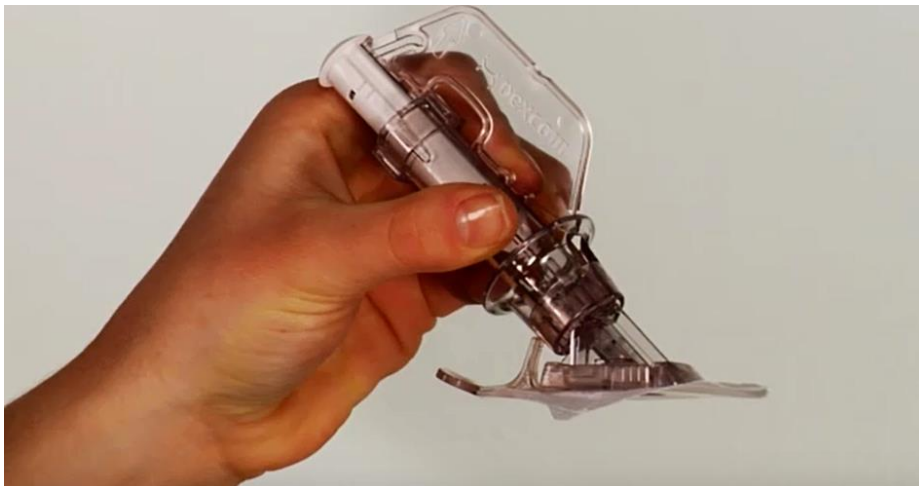

Dexcom sensor plaatsen

Plaats de sensor op de huid en duw de kleefpleister aan



Dexcom sensor plaatsen

Verwijder beveiligingsslot




Dexcom sensor plaatsen

Maak een huidplooi en plaats 2 vingers boven de sensorkolom en je duim op de drukknop



Dexcom sensor plaatsen


Duw dmrv je duim de applicator naar beneden en herplaats wijsvinger en middenvinger onder de kolom

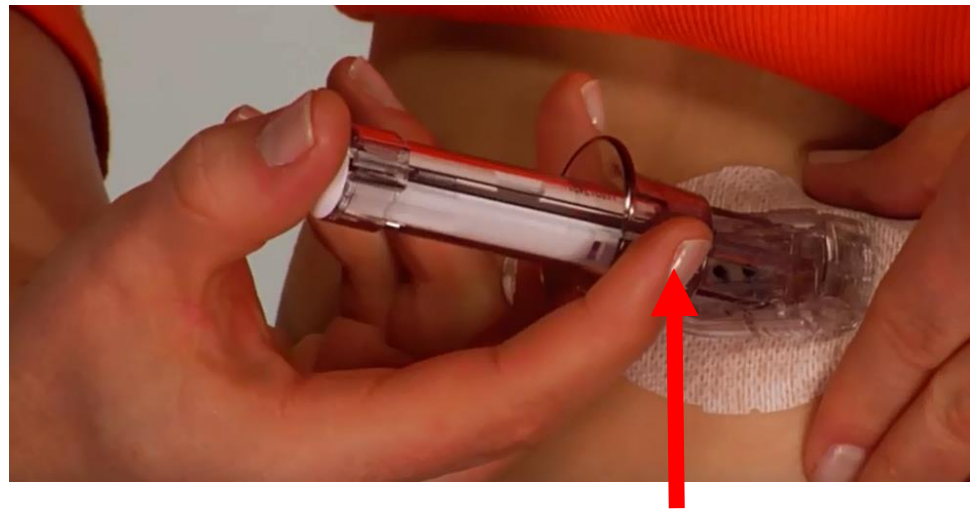

(je hoort 2 klikken)

Dexcom sensor plaatsen

Trek de sensorkolom nu naar boven

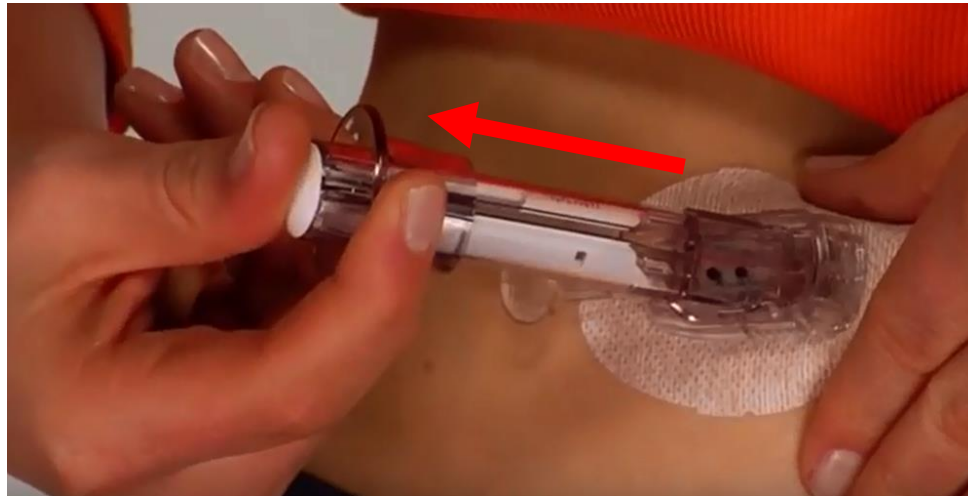

Dexcom sensor plaatsen

Plaats nu de vingers aan de zijkant en druk naar binnen, buig sensorapplicator naar voren en vervolgens verwijder je deze



Dexcom sensor plaatsen

Plaats nu de zender op de sensor



Dexcom sensor plaatsen

Buig 'hendeltje' naar voren



Hierdoor klikt de zender vast

Dexcom sensor plaatsen

Buig hendel terug richting huid en draai om en verwijder deze



Dexcom sensor plaatsen

[Bekijk hier de volledige instructiefilm](#)

Diabetesteam UZ Leuven

016/34 14 32

pompeducatoren@uzleuven.be

www.uzleuven.be/diabetescentrum